




IPC

Verweilkatheter

3 / 2 0 1 1

kostenfreie Servicenummer
0800-8599446

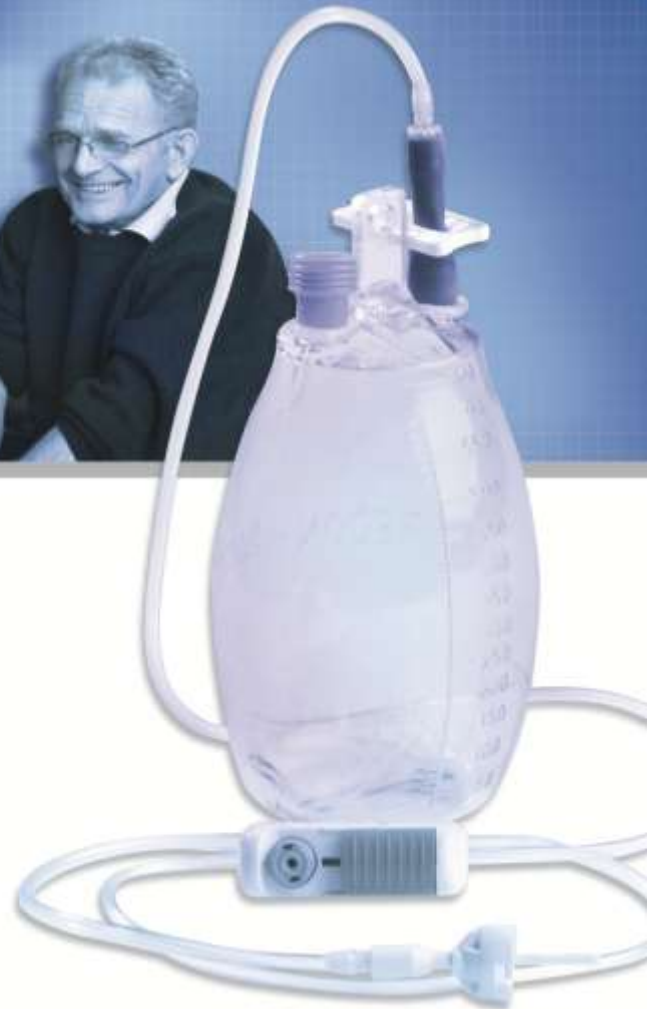

INHALT:

Weshalb IPC? 2

Vorteile von
IPC bei der
Heimdrainage 2

IPC Sets-
Übersicht 3

Was Sie noch
wissen sollten 3

Bestellüber-
sicht und
Kontaktinfo 4

Innovative Lösungen für die Heimdrainage bei Pleuraerguss bzw. Aszites

Innovationen
made in EU 

 **MED-DEPOT BERLIN**
Innovation - Vertrauen - Sicherheit



600ml Drainage-
flasche bei Pleura-
erguss

Für den Patienten ergeben sich durch diese Maßnahme verbesserte Lebensqualität, eine Symptomkontrolle und eine Verringerung der klinischen Aufenthalte.



2000ml Drainage-
beutel bei Aszites
(Bauchwasser)

Weshalb IPC?

Der "Indwelling Pleural bzw. Peritoneal Catheter", (IPC) von Rocketmedical, ist ein weicher Silikon-Drainageschlauch. Dieser wird Ihnen nach diagnostiziertem Pleuraerguss bzw. Aszites von ihrem Arzt minimalinvasiv bei lokaler Anästhesie eingepflanzt, um angesammelte Flüssigkeit aus ihrem Bauch- oder Brustraum abzuleiten.

Die Flüssigkeit ist Grund für ihre zunehmenden Beschwerden wie Kurzatmigkeit und Schmerzen. Der Katheter gibt ihnen die Möglichkeit, die Flüssigkeit aus dem Bauch- bzw. Brustraum schnell und einfach in eine Drainageflasche oder -beutel abzuleiten. Dies können Sie selbst, ein Angehöriger oder eine für Sie zuständige Schwester der häuslichen Krankenpflege (Pflegepersonal) tun.

Vor Ihrer Entlassung nach Hause erhalten Sie eine Einweisung, wie Sie die Drainageflasche bzw. den Drainagebeutel an ihren Katheter anschließen, um die Flüssigkeit zu entfernen. Nach der Drainage wird die benutzte Flasche vom

Katheter getrennt und entsorgt. Ihre zuständige Schwester erklärt ihnen die Vorgehensweise. Der Katheter wird dann mit einem Verband abgedeckt und ist unter Ihrer Kleidung nicht sichtbar. Im gewohnten Tagesablauf gibt es keine Einschränkungen. Wenn der Verband korrekt angelegt ist, können Sie sogar duschen oder baden.

Mitarbeiter/innen Ihrer Sozial- bzw. Pflegestation sind Ihre Ansprechpartner bei Fragen und Problemen. Gern unterstützen diese Sie, wenn erforderlich, bei der Materialbeschaffung und übernehmen, wenn nötig, auch die Drainage.



Die Vorteile des Rocket IPC Systems für Klinik und Heimanwendung:

Einzigartige Abflusskontrolle: IPC ermöglicht dem Patienten bzw. der betreuenden Person die vollständige Kontrolle der Drainage. Dadurch deutliche Reduzierung der Beschwerden während der Drainage. Das Risiko etwaigen Vakuumverlustes in der Flasche vor Anschluss des Katheters wird reduziert.

Silikon-Katheter: weiches, knickresistentes Material, zugelassen für hohe Verweildauer, was zu mehr Patientenkomfort führt. 16FGx40cm Katheter, perforiert auf 24cm langem Abschnitt mit vergrößertem Durchmesser, um maximalen Abfluss zu ermöglichen und ein Okklusionsrisiko zu minimieren. Komplettiert mit einer Polyester-Manschette um ein schnelles Einwachsen in das Gewebe zu ermöglichen bei Minimierung des Infektionsrisikos und zur Unterstützung der Sicherheit bei der Katheter-Applikation.

Sicherheitsventil mit einzigartigem Verschluss-System: verhindert das Eindringen von Luft oder Flüssigkeit. Verhindert ein unbeabsichtigtes Trennen der Verbindung während der Drainage. Der versehentliche Verlust der Ventilkappe wird verhindert und eine Kontamination minimiert.

Die IPC Sets



Das Rocketmedical IPC Insertions Set (auch Implantier Set), bestehend aus dem eigentlichen IPC-Katheter, einem weichen Silikonschlauch sowie den für den minimalinvasiven Eingriff erforderlichen Instrumenten und Verbandsmitteln. Das Set wird als Einmalgebrauchs Set sowohl bei Pleuraerguss als auch Aszites in einer sterilen Box geliefert und ist sofort einsatzbereit. Der IPC-Katheter wird in der sog. Tunnelungstechnik implantiert, unter lokaler Anästhesie in der Klinik.

Nach erfolgreicher Implantierung erhalten Sie eine eingehende Einweisung in die Verwendung der Drainage- und Verbands Sets für die Anwendung daheim. Diese Schulung erfolgt durch qualifizierte und zertifizierte Mitarbeiter der Klinik, der Sie betreuenden Pflegeeinrichtung oder durch Spezialisten aus unserem Hause.

Die Sets für die Heimanwendung werden Ihnen in der Regel auf Rezept durch MED-DEPOT Berlin nach Hause bzw. in Ihre Pflegeeinrichtung geliefert. Je nach Anwendung (Brust- oder Bauchbereich) enthalten die Sets neben Verbandsmaterial, Verschlusskappen und Schlauchklemmen eine Drainageflasche bzw. einen Drainagebeutel. Bitte achten Sie bei der Anwendung auf die in den Anleitungen beschriebenen hygienischen Umgebungsbedingungen, die korrekte Ausführung der einzelnen Schritte sowie auf ordnungsgemäße Entsorgung der verbrauchten Materialien.

Das Sie betreuende medizinische Personal unterstützt Sie gern jederzeit bei allen Fragen.



„Indwelling pleural catheters are increasingly being used for ambulatory treatment of malignant pleural effusion, particularly for patients unsuitable for pleurodesis.“

from the Centre of Respiratory Research (Drs. Janes and Lee), University College London, UK; and Oxford Pleural Unit (Drs. Rahman and Davies), Oxford Centre for Respiratory Medicine and University of Oxford, Oxford, UK.

veröffentlicht:

Chest 2007;131;1232-1234

CHEST

Was Sie noch wissen sollten

Neben einer Einweisung durch speziell ausgebildetes Personal, den Ihnen zur Entlassung aus der Klinik mitgegebenen Unterlagen können Sie gern auch auf unsere Schulungsvideos zurückgreifen. Diese finden Sie ganz einfach auf unserer Homepage unter www.mdberlin.com/de/palliativmedizin/patienteninformationen.html






MED-DEPOT Berlin
 Inh. Marian Kollaske
 Landsberger Str. 230
 12623 Berlin

Telefon: 0800-8599446 **kostenfrei**
 Fax: 030-859944-80
 E-Mail: sales@mdberlin.com
 Web: www.mdberlin.com

Copyright MED-DEPOT Berlin, August 2011
 Nachdruck, Kopie und Weitergabe der Kopie nicht gestattet
 Rocket Medical und MED-DEPOT Berlin eingetragene Warenzeichen

Standorte

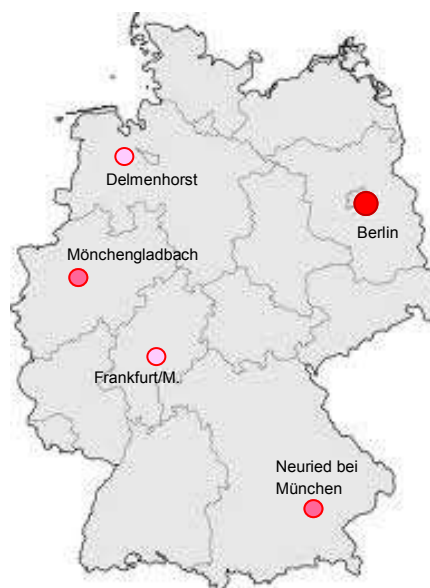

Bestellinformationen

kostenfreie Servicenummer 0800-8599446

Rocket Code	MDB Code	Beschreibung	Thorax(P)/ Abdomen (A)	Klinik (K)/ Heim (A)	VE
R54400	11100878	Rocket IPC Verbands- und Drainage Set + Flasche (Pleuraerguss)	P	A/K	5
R54400-16-40	11100880	Rocket IPC Katheter Implantations Set	P/A	K	1
R54401	11100882	Rocket IPC Peritonealkatheter Beutel und Verbandspack (Aszites)	A	A/K	5
R54410	11100883	Rocket IPC Sekretflasche, Vakuum 600ml	P	A/K	5
R54410-00-CP	11100884	Rocket IPC Ventilkappe	P/A	A/K	10
R54410-00-DL	11100885	Rocket IPC Drainageleitung	P/A	A/K	10
R54410-00-VV	11100886	Rocket IPC Ersatzventil	P/A	A/K	1
R54410-16-11	11100887	Rocket IPC Short Split Sheath Dilator 16G x 11cm	P/A	K	1
R54410-16-17	11100888	Rocket IPC Split Sheath Dilator 16G x 17cm	P/A	K	1

Einfache Bestellung: Alle Komponenten für die Implantierung des Katheters, die Drainage und nachfolgendem Verbandwechsel des Katheters werden in sterilen Einmalgebrauchs-Sets geliefert. Die einzelnen Bestell-Nummern finden Sie in der o.a. Tabelle.

Für die außerklinische Anwendung (Heimdrainage) ist die Einsendung eines Rezeptes erforderlich unter Angabe der Hilfsmittelkatalognummer 01.24.05.XXXX.